

Lees onderstaande informatie goed door voordat u begint aan het uitvoeren van de vingerprik

Belangrijke informatie

- Dit is een bloedafname kit voor het uitvoeren van een vingerprik voor het meten van uw biological (een biologisch geneesmiddel) concentratie. Dit heeft uw behandelend arts met u afgesproken.
- Neem het bloedmonster altijd af voordat u de volgende behandeling met biologicals krijgt. U neemt het bloedmonster bijvoorbeeld de dag voordat u naar het ziekenhuis gaat voor een nieuw infuus. Of vlak voordat u thuis zelf onderhouds de biological toedient middels een injectie in uw buik of bovenbeen.

Algemene informatie

- Is deze set niet voor u? Stuur het dan retour.
- Lees de gebruikshandleiding voor de vingerprik eerst goed door voordat u deze uitvoert.
- Voer de vingerprik niet uit op een vrijdag, zaterdag, zondag of de dag voor een feestdag. Voer de vingerprik alleen uit op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.
- Het is van belang dat de vingerprik correct wordt uitgevoerd. Schakel zo nodig hulp in van een ander persoon.

Waarschuwingen

- De bloedafname kit is uitsluitend bedoeld voor eigen eenmalig gebruik om een bloedmonster af te nemen.
- De set mag uitsluitend worden gebruikt door personen die 18 jaar of ouder zijn.
- Bewaar de set buiten het bereik van kinderen. De set kan losse onderdelen bevatten.
- Overleg altijd met uw behandelend arts bij twijfel.
- Als je problemen hebt met het zien van bloed of met bloedprikken, prik dan alleen bloed in het bijzijn van iemand anders.

Voor een video instructie, ga naar www.sanquin.nl/vingerprik scan de QR code. For an English version please visit the website or scan the QR code



Heeft u vragen? Kijk eerst op de achterzijde van deze gebruikshandleiding

Komt u er toch niet uit of wilt u feedback geven, stuur dan een bericht naar vingerprik@sanquin.nl. Wij streven ernaar binnen 3 werkdagen te antwoorden. Neem contact op met uw behandelend arts voor vragen over uw behandeling en de uitslag van de bloedafname.

Vervolg meest gestelde vragen en antwoord

Het lukt niet om het pakketje nog vandaag met de post mee te krijgen, wat moet ik nu doen?

Dat is jammer, maar niet erg. Zet het buisje dan in de koelkast (nooit in de vriezer) en post het morgen eind van de middag. Post de envelop alleen van maandag tot/met donderdag.

Ik heb toch op vrijdag, zaterdag of zondag de vingerprik afgenomen, is dit erg?

Nee, dat geeft niks. Zet het buisje dan in de koelkast en post het maandag eind van de middag.

Wanneer kan ik de uitslag verwachten?

De uitslag van de test krijgt u via uw behandelend arts.

Is het niet beter om een heel buisje af te nemen in plaats van deze vingerprik?

De testen die worden uitgevoerd hebben slechts een paar druppels bloed nodig voor een betrouwbare uitslag. Het is daarom niet nodig meer bloed af te nemen.

Geef bloed uit een vingerprik een even betrouwbare uitslag als een bloedafname in het ziekenhuis?

Ja, het is even betrouwbaar als een bloedafname in het ziekenhuis. Mocht u toch twijfelen bespreek dit dan met uw behandelend arts.

Kan ik de vingerprik posten als het buiten vriest of als er een hittegolf is?

In het geval het buiten vriest of boven de 25 graden is vragen wij u om de envelop af te geven bij een PostNL punt bij u in de buurt.

De vingerprik set bevat veel plastic, hoe schadelijk is dit voor het milieu?

Voor ons is duurzaamheid belangrijk. Wij maken gebruik van gerecycled plastic. Wij streven er ook naar om de vingerprik afname steeds milieu vriendelijker uit te voeren, bijvoorbeeld door het ontwerpen van een kartonnen verpakking.



Gebruiksaanwijzing Vingerprik voor bloedafname

Inhoud van de kit:

Stap 1

- Gebruiksaanwijzing
- Vraag en antwoord

Stap 2

- 2 prikpenen
- 1 pleister
- 1 alcohol doekje
- 1 gaasje
- 1 bloedopvang buisje

Stap 3

- SafetyBag
- Retourenvelop
- Afnameformulier




Vorbereiding




Controleer de inhoud van de kit en controleer uw naam op het adreslabel. Pak het materiaal uit dat u vindt in stap 2 van de vingerprik set en leg het voor u op tafel. Leg ook het afnameformulier op tafel.



Bereid een warm glas water voor. Was uw handen met warm water en zeep. Droog uw handen met een schone handdoek.

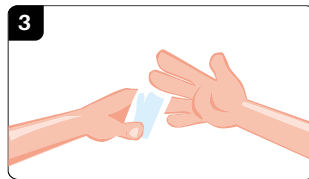


Ontsmet uw ring- of middelvinger met het alcoholdoekje. Laat uw vinger aan de lucht drogen. Bent u rechtshandig? Kies dan uw linkerhand om de vingerprik op uit te voeren. Hetzelfde geldt natuurlijk andersom.

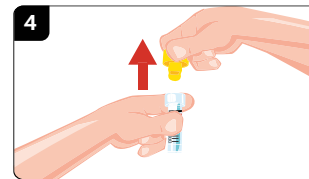


Ga aan een tafel zitten. Leg een keukenpapiertje klaar voor het geval bloed op de tafel komt. Zet het buisje voor u. Haal de gele dop van het buisje af. Leg de dop omgekeerd neer.


Vingerprik

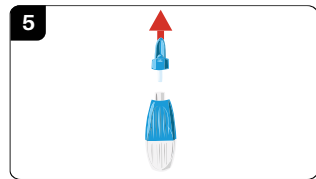


Verwijder het blauwe kapje van de vingerprikker door deze draaiend omhoog te trekken. **Let op: aanraken van de punt activeert het prikmechanisme**

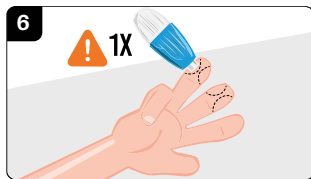

Verwarm uw hand aan een warm glas water voor 3 minuten. Leg de bovenkant van uw hand op de tafel en druk de vingerprikker stevig tegen de zichtbare zijkant van het topje van uw middel- of ringvinger tot u een klik hoort. Mocht dit niet lukken, vraag dan om hulp en laat iemand u prikken

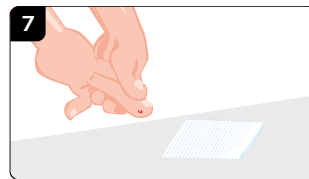


Masseer direct uw vinger van palm naar vingertop, totdat er een druppel bloed gevormd is. Veeg de eerste druppel weg met het steriele gaasje.

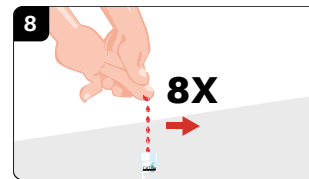


Masseer de vinger van palm naar vingertop om minimaal 8 grote druppels bloed in het buisje te laten vallen. Hoe meer bloed u afneemt, hoe gemakkelijker wij de test kunnen uitvoeren. Let op dat de opening van het buisje klein is.


Verzending

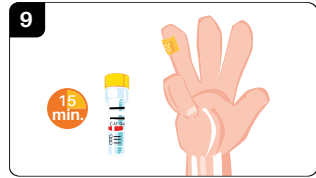


Plak een pleister op uw vinger. Sluit het buisje af door de dop stevig aan te drukken. Kantel het buisje een paar keer op en neer. Laat het buisje daarna minimaal 15 minuten rechtop staan.

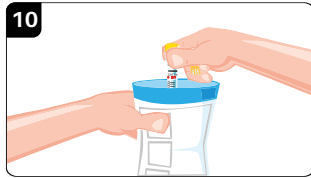

Plaats het buisje tussen de harde plastic delen van de SafetyBag. Verwijder de plakstrip en sluit de SafetyBag door deze goed vast te drukken.

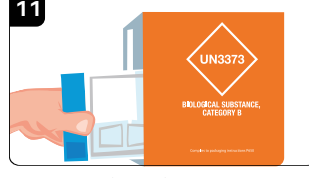

Vul op het afnameformulier de datum in waarop u de vingerprik heeft uitgevoerd. Vul ook de datum in van de laatste gift van uw biological behandeling. Vul tot slot uw naam en geboortedatum in. Doe het afnameformulier samen met de SafetyBag in de retourenvelop (stap 3 van de set). Verwijder de plakstrip van de retourenvelop en sluit deze.

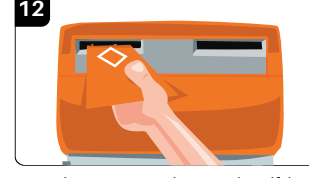

Post de retourenvelop op dezelfde dag van afname voor de laatste lichte. Kies een brievenbus die niet in de volle zon staat indien mogelijk. Indien u de retourenvelop niet op dezelfde dag kan posten, bewaar de envelop dan in de koelkast. Let op: als het buiten vriest of warmer is dan 25 °C moet u de retourenvelop bij een PostNL punt inleveren.

Afronding



De materialen die overblijven kunt u weggooien in de daarvoor bestemde afvalbak. Wij maken deels gebruik van gerecycled plastic.

Betekenis symbolen

- CE Conformité Européenne
- REF Artikelnummer
- LOT Batchnummer
- Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

- ☀️ Uit de buurt van zonlicht houden
- ☔ Droog houden
- 📖 Lees de gebruiksaanwijzing voordat je bloed gaat prikken
- IVD In-vitro diagnostiek
- STERILEEO Gesteriliseerd met behulp van bestraling

- 🚫 Uitsluitend voor eenmalig gebruik
- 🌡️ Bewaren bij temperatuur tussen de 4°C en 25°C
- 🕒 Vervaldatum
- 🏭 Fabrikant

Meest gestelde vragen

Het lukt niet om een druppel bloed uit mijn vinger te krijgen.

Heeft u ook de tweede prikker al geprobeerd? Het is belangrijk om tijdens het prikken uw hand op een harde ondergrond te houden en de vingerprikker stevig tegen de zichtbare zijkant van het topje van uw middel- of ringvinger te drukken tot u een klik hoort. Het kan ook helpen om u door iemand anders te laten prikken. Mocht het met de tweede prikker ook niet lukken, stuur dan het lege buisje op met de retourenvelop. Informeer ook uw behandelend arts dat de vingerprik niet is gelukt.

Het setje is kapot (buisje is kapot of prikker werkt niet).

Dat is erg vervelend. U kunt de vingerprik nu niet uitvoeren. Informeer in dit geval wel uw behandelend arts. Wij zoeken u om het vingerprik setje retour te sturen en op de envelop te schrijven: materiaal defect.

Het is niet gelukt om acht complete druppels in het buisje te krijgen.

Vaak zit er toch genoeg bloed in het buisje om de testen alsnog te doen, dus stuur het buisje wel op! U hoeft in dit geval niet uw behandelend arts op de hoogte te stellen.

Hoe weten jullie dat dit buisje bij mij hoort, want er staat nergens een naam?

De buisjes zijn gecodeerd met een barcode en op die manier aan u gekoppeld. Daarnaast controleren wij nog uw naam en geboortedatum die u zelf noteert op het afnameformulier.

Ik ben vergeten mijn naam op de retourenvelop te zetten, wat nu?

Dat is niet erg en hoeft ook niet. De buisjes zijn gecodeerd en op die manier aan u gekoppeld.

Ik wil toch niet op deze manier een bloedonderzoek uitvoeren. Wat moet ik met het pakketje doen?

U kunt het pakketje retourneren. Informeer in dit geval wel uw behandelend arts van uw keuze.

Zie achterzijde voor meer informatie